

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО
Радиофизический факультет

Отчет по лабораторной работе №312

**Изучение явлений двулучепреломления и поляризации
света на приборе Норренберга**

Выполнили студенты 420 группы
Понур К.А., Сарафанов Ф.Г., Сидоров Д.А.

Нижний Новгород, 2018

Содержание

1 Введение	2
2 Часть 1	3
2.1 Двойное преломление и поляризация света в кристаллах. Устройство поляризаторов из кристаллов кальцита. Опыты Гюйгенса.	3
2.2 Практическая часть	4
2.2.1 Исландский шпат	4
2.2.2 Полярископ	6
3 Часть 2	7
3.1 Поляризация световых волн при отражении и преломлении	7
3.2 Практическая часть	8
4 Часть 3	10
4.1 Интерференция поляризованного света в параллельных лучах. Фазовые пластиинки $\lambda/2$ и $\lambda/4$ и образцы для исследования. Вращение плоскости колебаний в кристаллах кварца. Опыты с удвоителем Норренберга	10
4.2 Бикварц	14
4.3 Практическая часть	15
4.3.1 Определение типа пластинок	15
4.3.2 Наблюдения с узкополосным фильтром	15
4.3.3 Вращение поляризации в кристаллах кварца	15
5 Заключение	16

1. Введение

Прибор Норренберга - универсальный учебный поляризационный прибор. Его можно использовать и как полярископ и как поляриметр. Он дает возможность получать полярное ванний свет, изменить поляризацию света, анализировать поляризованный свет, наблюдать интерференцию в поляризованном свете и измерять углы поворота плоскости поляризации в оптически активных средах. Прибор Норренберга состоит из поляризатора, анализатора, трех поворотных столиков, револьверной обоймы для быстрой смены светофильтра и специального осветителя, смонтированного на общем основании с прибором (рис. I). Поляризатором служит прозрачное стеклянное зеркало в оправе, допускающей поворот вокруг горизонтальной оси и установку зеркала под углом Брюстера к отраженному вверх или вниз пучку света. Как известно, свет отраженный под углом Брюстера полностью линейнополяризован. Световая трубка осветителя имеет лишь две необходимые степени свободы, а именно: перемещение ее вверх и вниз (по двум вертикальным направлениям) и поворот вокруг горизонтальной оси, этого достаточно для направления светового пучка на поляризующее зеркало под углом Брюстера. Особенностью прибора Норренберга нашей конструкции является возможность быстрой установки его как по обычной, простой схеме (рис. 2а), так и по схеме "удвоителя Норренберга" (рис. 2б). В удвоителе поляризованный свет проходит через исследуемый образец дважды (вниз и после отражения от вспомогательного горизонтального зеркала вверх, по направлению к глазу наблюдателя). Двойное прохождение света через образец позволяет наблюдать ряд новых интересных явлений. Верхний столик предназначен для установки и поворота сменных анализаторов, которыми поочередно могут быть поляризационная призма из исландского шпата, пленочный поляроид в специальной оправе, черное зеркало и стопа стеклянных пластин. Исследуемые образцы обычно помещают на среднем столике, а в схеме удвоителя их можно помещать как на среднем, так и на нижнем столике прибора. Настроенный прибор Норренберга посылает на исследуемый образец линейно-поляризованный свет с колебаниями вектора \mathbf{E} , происходящими перпендикулярно плоскости падения в направлении перпендикуляра, соединяющего стойки прибора.

2. Часть 1

2.1. Двойное преломление и поляризация света в кристаллах. Устройство поляризаторов из кристаллов кальцита. Опыты Гюйгенса.

Двойное преломление открыто в 1669 году датским ученым Зразмом Бартолином в кристаллах кальцита ($CaCO_3$), привезенных из Исландии. По месту находки кальцит назвали исландским шпатом. В 1690 году голландский физик Христиан Гюйгенс открыл поляризацию света при двойном преломлении в кристаллах кальцита.

Природный кальцит легко колется по плоскостям спайности параллельным граням ромбоэдра. Поэтому ему нетрудно придать форму ромбоэрической призмы или ромбоэдра. Ромбоэдр - это шести гранник, все шесть граней которого одинаковые ромбы. Его можно рассматривать как куб, сжатый вдоль одной из его пространственных диагоналей. Каждая из восьми вершин ромбоэдра есть вершина трехгранного угла, но две из них резко отличны от шести остальных. Две особенные вершины образованы тремя одинаковыми плоскими углами, равными 102° . Каждая из шести остальных вершин обра зована одним тупым и двумя острыми углами в 78° .

Прямая, соединяющая две особенные вершины, есть короткая пространственная диагональ ромбоэдра и является его геометрической осью симметрии третьего порядка. При вращении ромбоэдра вокруг этой оси он через каждую третью полного оборота приходит в самосовпадение, занимая положение тождественное с исходным.

Направление оптической оси в кристалле $CaCO_3$ параллельно короткой пространственной диагонали ромбоэдра и образует углы в $63^\circ 45'$ и $45^\circ 22'$ с его ребрами и гранями, соответственно. Плоскость, проходящую через падающий луч и направление оптической оси в точке падения, называют главной плоскостью или главным сечением двоякопреломляющего кристалла.

Бездефектные кристаллы кальцита до сих пор являются наилучшим материалом для изготовления высококачественных поляризующих свет призм - поляризаторов. Первая поляризующая призма из кальцита была изготовлена в 1828 году шотландским физиком Уильямом Николем. По имени изобретателя ее назвали: "призма Николя"или кратко "николь". Из-за присущих им недостатков причин Николя уже давно не изготавливают, но термин "николь"глубоко укоренился в учебной и научной литературе и употребляется как синоним любого типа поляризатора или анализатора. Словом "николь"называют и поляризаторы и анализаторы независимо от их устройства и принципа действия.

Для изготовления призмы Николя сильно удлиненную ромбоэрическую призму из

кальцита разрезают по плоскости, перпендикулярной главному сечению, на две равные части и склеивают их вновь канадским бальзамом.

Обыкновенный луч, с колебаниями перпендикулярными главному сечению испытывает полное отражение на границе с канадским бальзамом и поглощается на зачерненных боковых гранях призмы. Необыкновенный луч, с колебаниями в плоскости главного сечения, проходит через обе половинки призмы и дает линейно поляризованный свет на ее выходе.

Практически все современные поляризационные призмы из кальцита, подобно призме Николя, состоят из двух склеенных половинок, но отличаются от нее в лучшую сторону тем, что плоскости их входного и выходного сечений перпендикулярны продольной оси призмы и оси выходящего из нее поляризованного пучка.

Опыты Гюйгенса по наблюдению двойного преломления и поляризации света в кристаллах кальцита выполняются в нашей лаборатории на специальном полярископе с точечным источником света. Точечным источником служит светодиод АЛ 1028, питаемый от батарейки из двух элементов типа "373". Кристалл кальцита ставится на поворотный столик с центральным отверстием, под ко торым находится выдвижной пленочный поляроид в оправе и светодиод.

Для наблюдения двойного преломления в естественном (не - поляризованном) свете светящуюся точку рассматривают сквозь кристалл, через центрированный наглазник и поляроидный анализатор, располагаемые поочередно в специальном гнезде, на расстоянии наилучшего зрения от кристалла.

Для наблюдения в поляризованном свете в пространство между светодиодом и кристаллом вдвигается пленочный поляроид - поляризатор, а наглазник, я случае необходимости, заменяется поляроидным анализатором в идентичной с наглазником оправе.

2.2. Практическая часть

2.2.1 Исландский шпат

Пронаблюдали двулучепреломление и поляризацию света в кристалле исландского шпата.

Определили направление оптической оси:

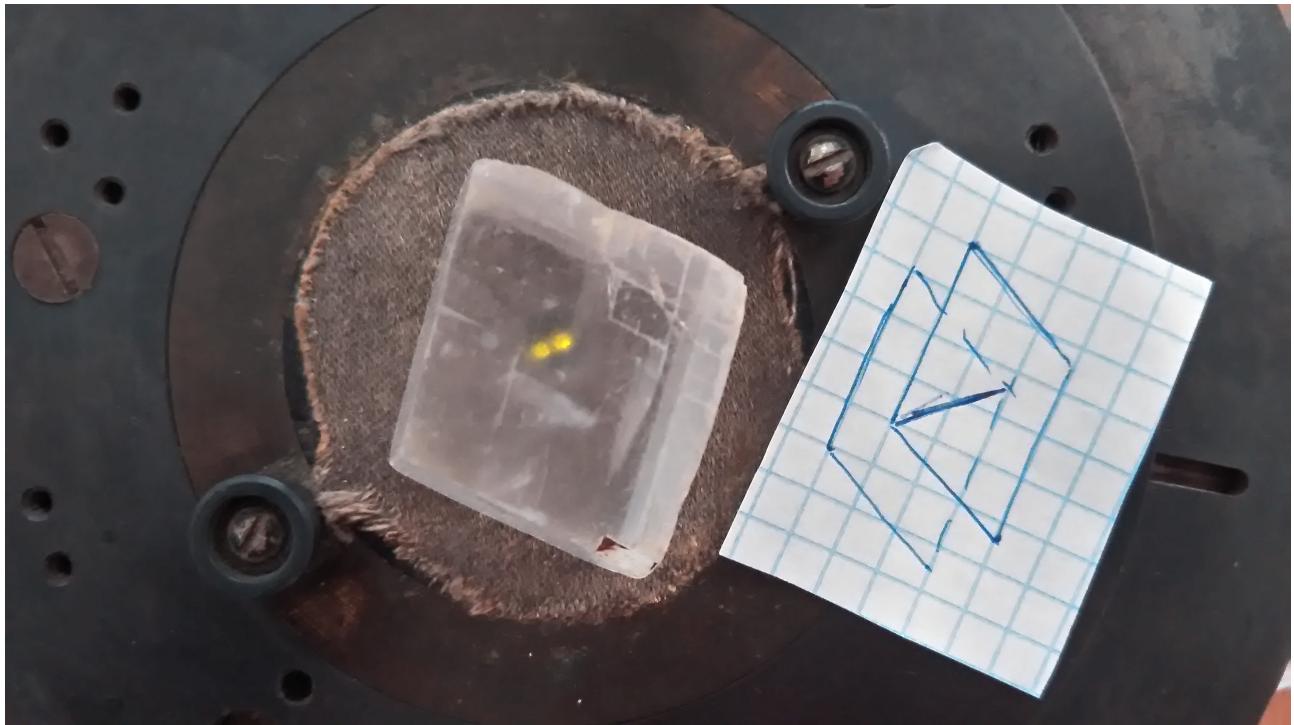


Рис. 1: Положение оптической оси

Нашли плоскость главного сечения, указали направление колебаний вектора E о- и е- волн.

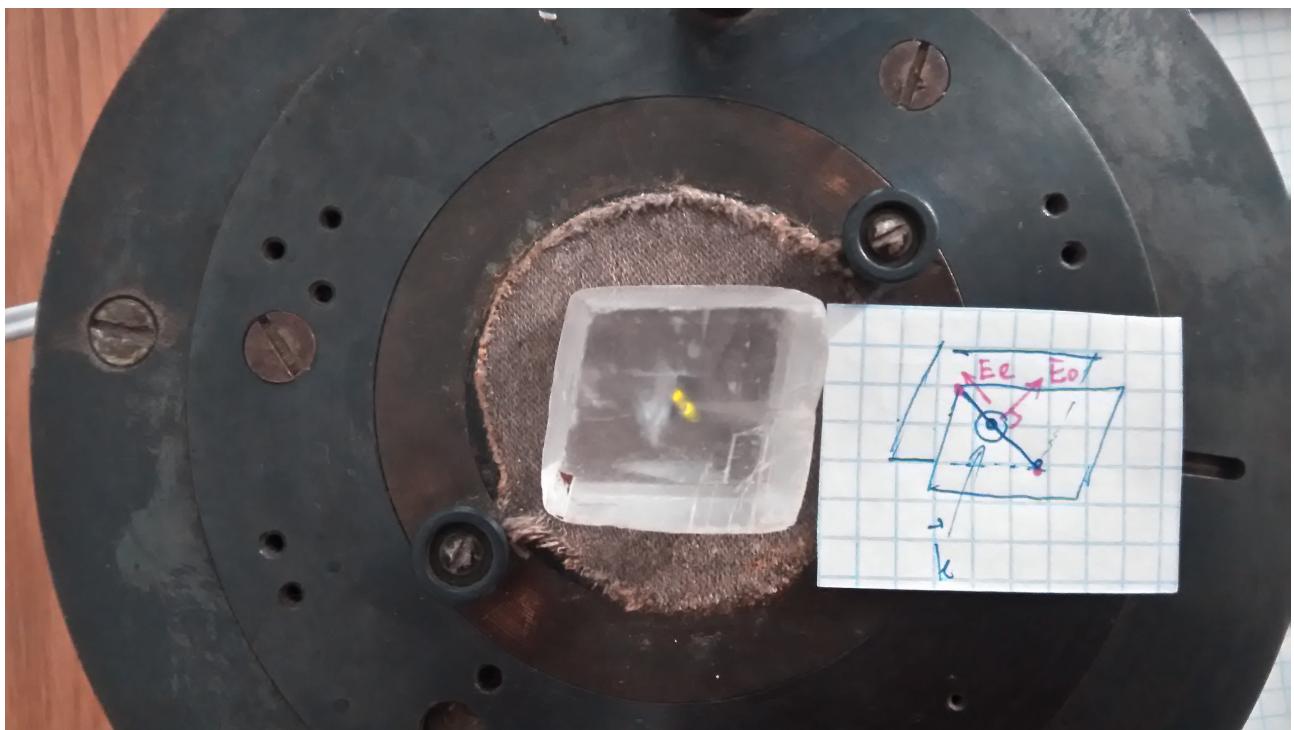


Рис. 2: Положение плоскости главного сечения: образуются векторами k и оптической осью. Направление колебаний вектора E в обычновенной и необыкновенной волнах

2.2.2 Полярископ

Пронаблюдали двулучепреломление естественного света. Для этого рассмотрели светодиодную точку на кристалле. Точка, отвечающая обыкновенной волне, неподвижна при небольшом повороте кристалла и если убрать кристалл, остается на прежнем месте, а отвечающая e-волне, смещается.

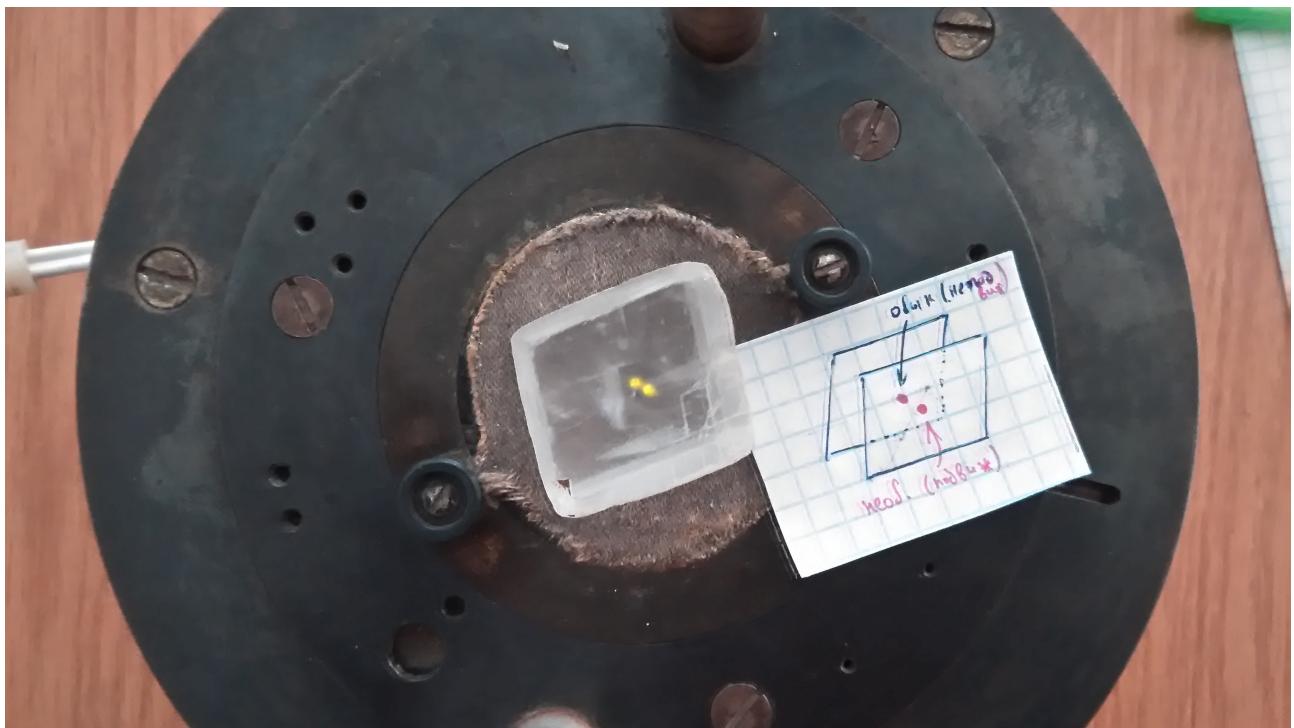


Рис. 3: Положение точек при вращении

Вращая кристалл, получили четыре относительных положения обеих точек и положений плоскости главного сечения (относительно друг друга остаются неподвижными)

Сделали вывод, что изображение необыкновенной точки «ближе к глазу»

Наблюдая за кристаллом через вращаемый анализатор, заметили чередование максимума яркости одной точки и минимума другой. Смена происходит через каждые $\frac{\pi}{2}$, это обосновывается перпендикулярной поляризацией e- и o- волн.

3. Часть 2

3.1. Поляризация световых волн при отражении и преломлении

Энергетический коэффициент отражения плоской световой волны по определению равен

$$\rho = \frac{P_1}{P} = \frac{\bar{E}_1^2}{\bar{E}^2} \quad (1)$$

Здесь P_1 и P , \bar{E}_1^2 и \bar{E}^2 - соответственно потоки энергии и средние по времени квадраты напряженности электрического поля в отраженной и падающей волне.

Из формулы Френеля следует, что коэффициент отражения ρ от плоской границы двух диэлектриков зависит от направления вектора \mathbf{E} в падающей волне. Так, если вектор \mathbf{E} перпендикулярен к плоскости падения, то

$$\rho_{\perp} = \frac{\sin^2(\varphi - \psi)}{\sin^2(\varphi + \psi)}, \quad (2)$$

где φ - угол падения, а ψ - угол преломления.

Если же вектор \mathbf{E} параллелен плоскости падения, то

$$\rho_{\parallel} = \frac{\operatorname{tg}^2(\varphi - \psi)}{\operatorname{tg}^2(\varphi + \psi)} \quad (3)$$

Из (2) и (3) видно, что:

1. При любом φ $\rho_{\perp} > \rho_{\parallel}$
2. При $\varphi + \psi = \frac{\pi}{2}$ (3.1) $\rho_{\perp} \neq 0$ при ρ_{\parallel} .

Это означает, что в отраженном свете всегда преобладает E_{\perp} . При отражении под углом Брюстера, удовлетворяющим условию (3.1) отраженный свет полностью линейно поляризован. При этом преломленный свет оказывается частично поляризованным.

Угол отражения, удовлетворяющий соотношению (3.1), называют углом полной поляризации или углом φ_B по имени шотландского ученого Давида Брюстера, открывшего в 1812 году полную поляризацию при отражении. Из закона преломления

$$\frac{\sin \varphi}{\sin \psi} = n \quad (4)$$

и условия (3.1) следует:

$$\operatorname{tg} \varphi_B = n \quad (5)$$

В качестве числовой характеристики частично поляризованного света используется понятие степени поляризации. Так, степень поляризации отраженного света по определению

равна

$$\Delta = \frac{I_{\perp} - I_{\parallel}}{I_{\perp} + I_{\parallel}} \quad (6)$$

Аналогично определяется степень поляризации преломленного света и света, прошедшего через прозрачную плоскопараллельную пластинку.

Прохождение света через пластинку эквивалентно двум последовательным преломлениям на ее первой и второй границе с воздухом. При каждом преломлении степень поляризации возрастает на несколько процентов (порядка 8% при $n = 1.52$). Пропустив свет через стопу из достаточно большого числа ($N \approx 20$) тонких пластин, можно получить степень поляризации близкую к единице.

Таким образом, прозрачное стеклянное зеркало, зеркало из черного стекла и стопу стеклянных пластин можно использовать в качестве поляризатора или анализатора.

3.2. Практическая часть

По формуле (5) при $n \approx 1.5$ вычислили угол Брюстера $\varphi_B = 56.5^\circ$. Заменили стандартный анализатор черным зеркалом и установили его под углом, близким к предполагаемому углу Брюстера. Сложна



Рис. 4: Изображение окна осветителя



Рис. 5: Изображение окна осветителя померкло

4. Часть 3

4.1. Интерференция поляризованного света в параллельных лучах. Фазовые пластиинки $\lambda/2$ и $\lambda/4$ и образцы для исследования. Вращение плоскости колебаний в кристаллах кварца. Опыты с удвоителем Норренберга

Пусть линейно поляризованный свет, прошедший через узкополосный фильтр Φ и поляризатор Π , падает на двупреломляющую пластинку толщины d нормально к ее большим граням в положительном направлении оси Z (рис.??). Пусть, кроме того, большие грани пластинки параллельны оптической оси X , образующей углы α и β с направ-

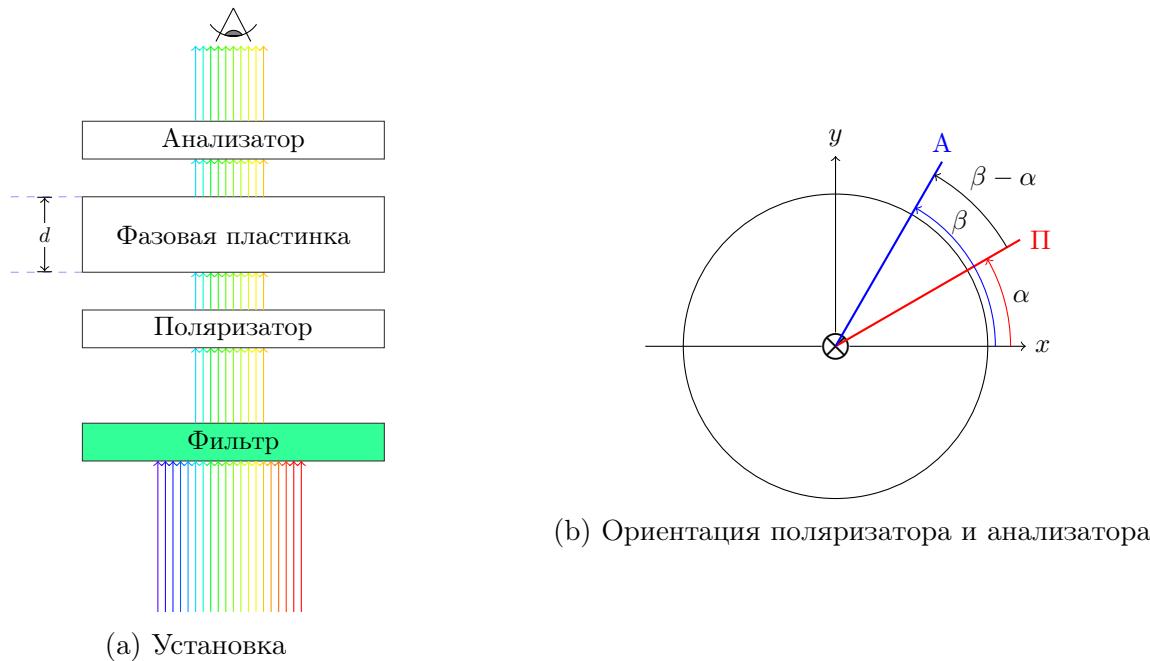


Рис. 6: Иллюстрации к объяснению

лениями колебаний вектора \mathbf{E} на выходе поляризатора Π анализатора A соответственно (рис. ??). Электрическое поле \mathbf{E} в падающем на пластинку параллельном пучке можно приближенно описать уравнением плоской бегущей волны

$$\mathbf{E}(t) = \mathbf{E} \cos(\omega t - kz) \quad (7)$$

На входной грани $Z = 0$ поле $\mathbf{E} \cos(\omega t)$ возбуждает в пластинке два взаимно перпендикулярных колебания \mathbf{E}_y (обыкновенная волна) и \mathbf{E}_x (необыкновенная волна) с амплитудами $E \sin \alpha$ и $E \cos \alpha$ и разными скоростями распространения вдоль оси Z

$$V_z^{\text{об}} = V_o = \frac{c}{n_0} \quad (8)$$

$$V_z^{\text{необ}} = V_e = \frac{c}{n_e} \quad (9)$$

Здесь n_0 и n_e – главные показатели преломления обыкновенной и необыкновенной волн.

На выходе из пластинки получаются взаимоперпендикулярные колебания

$$E_y = E \sin \alpha \cos(\omega t - k_y d) \quad (10)$$

$$E_z = E \cos \alpha \cos(\omega t - k_z d), \quad (11)$$

где

$$k_y = \frac{\omega}{V_0} = \frac{\omega}{c} \cdot n_0 = kn_0, k_x = \frac{\omega}{V_e} = \frac{\omega}{c} \cdot n_e = kn_e \quad (12)$$

Эти колебания сдвинуты по фазе на величину

$$\delta = (k_x - k_y)d = k(n_e - n_0)d = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta nd, \quad (13)$$

зависящую от длины волны λ и свойств пластинки.

Разность главных показателей преломления $\Delta n = n_e - n_0$ называют величиной двупреломления или просто «двупреломлением». На вход анализатора А поступает суперпозиция двух векторных взаимно перпендикулярных колебаний с неравными амплитудами $E \sin \alpha$ и $E \cos \alpha$ и постоянным сдвигом фаз δ , т.е. эллиптически поляризованное колебание, которое в специальных случаях может переходить в поляризованное по кругу (при $\alpha = \pm \frac{\pi}{4}$ и $\delta = \pm \frac{\pi}{2}$). При эллиптической поляризации конец вектора Е движется (в фиксированной плоскости XY) по эллипсу, ориентация которого зависит от амплитуд $E \sin \alpha$, $E \cos \alpha$ и разности фаз δ . Из-за зависимости $\delta(\lambda)$ положение эллипса поляризации изменяется с изменением длины волны λ .

Анализатор А, расположенный на расстоянии $Z - d$ от пластинки, пропускает а глаз наблюдателя сумму двух параллельных колебаний

$$E = E \cos \alpha \cos \beta \cos [\omega t - k_x d - k(z - d)] + \quad (14)$$

$$+ E \sin \alpha \sin \beta \cos [\omega t - k_y d - k(z - d)] \quad (15)$$

с приобретенным в пластинке сдвигом фаз δ . Тем самым создается возможность наблюдать интерференцию в параллельном поляризованном свете. Для описания интерференционной картины необходимо знать интенсивность света I на выходе анализатора, которая с точностью до постоянного размерного множителя равна квадрату амплитуды Е ($I \approx E^2$). Чтобы найти и получить для I выражение удобное для интерпретации, обозначим $E \cos \alpha \cos \beta = a_1$, $E \sin \alpha \sin \beta = a_2$ и воспользуемся известной формулой для квадрата амплитуды суммарного колебания:

$$E^2 = a_1^2 + a_2^2 + 2a_1 a_2 \cos \delta = (a_1 + a_2)^2 - 4a_1 a_2 \sin^2 \frac{\delta}{2} \quad (16)$$

После несложных тригонометрических преобразований, получаем

$$I = I \left[\cos^2(\beta - \alpha) - \sin 2\alpha \sin 2\beta \sin^2 \frac{\delta}{2} \right] \quad (17)$$

Формула (17) описывает все возможные случаи прохождения параллельных линейно поляризованных лучей через пластинку, параллельную оптической оси, и анализатор. Особый интерес представляет случай наблюдения в скрещенных и в параллельных николях.

При скрещенных николях $\beta - \alpha = \frac{\pi}{2}$ и

$$I_{\perp} = I \sin^2 2\alpha \sin^2 \frac{\delta}{2} \quad (18)$$

При параллельных николях $\beta - \alpha = 0$ и

$$I_{\parallel} = I \left(1 - \sin^2 2\alpha \sin^2 \frac{\delta}{2} \right) \quad (19)$$

Следовательно

$$I_{\perp} + I_{\parallel} = I \quad (20)$$

Соотношения (20) справедливы для каждой спектральной компоненты в случае падающего на устройство белого света. Суммируя равенства (20) для компонент белого света получим

$$\sum_{\lambda} I_{\perp} + \sum_{\lambda} I_{\parallel} = \sum_{\lambda} I \quad (21)$$

Как видно из формулы (17) интенсивность в интерференционной картине зависит от величины δ . Рассматривая двупреломляющую пластинку через анализатор, глаз будет видеть ее светлой, темной или в разных местах различно окрашенной в зависимости от энченции и распределения сдвига фаз δ по поверхности пластины. Сам сдвиг фаз δ , как видно из (13), зависит от порядка интерференции $m = \frac{\Delta nd}{\lambda}$. При низких порядках интерференции наблюдаются цветные интерференционные окраски, появление которых следует из структуры формулы (17), в которой первое слагаемое $\cos^2(\beta - \alpha)$ постоянно для всех цветов, а второе - содержащее множитель $\sin^2 \frac{\delta}{2}$, зависит от λ . Наиболее сочные интерференционные окраски наблюдаются в скрещенных николях, когда $\cos^2(\beta - \alpha) = 0$, а амплитуды $E \sin \alpha$ и $E \cos \alpha$ одинаковы. Положение пластиинки, при котором $E \cos \alpha = E \sin \alpha$ и $\alpha = \pm \frac{\pi}{4}$ называется «диагональным», оно особенно благоприятно для наблюдения интерференционных окрасок при освещении белым светом.

Для изменения характера поляризации и анализа поляризованного света применяют фазовые пластиинки в половину и в четверть длины волны. Это двупреломляющие пластиинки, параллельные оптической оси, на выходе из которых сдвиг фаз между обычновенной и необыкновенной волной равен $\pm \pi$ или $\pm \frac{pi}{2}$, соответственно. Толщины полуволновых и четверть-волновых пластиинок вычисляются из условия $\Delta d = \frac{\lambda}{2}$ и $\Delta nd = \frac{\lambda}{4}$. Фазовые пластиинки чаще всего изготавливают из таких природных кристаллов, как исландский шпат

($CaCO_3$), кварц (SiO_2) и слюда.

При работе с образцами из кварца следует иметь в виду, что кварц, наряду с двойным преломлением, обладает еще одним удивительным свойством совсем иной природы, а именно - способностью вращать плоскость колебаний линейно поляризованного света. Эта способность называется оптической активностью и обусловлена особым, винтовым расположением молекул SiO_2 в кристаллической решетке кварца. Вращение плоскости колебаний наиболее сильно выражено именно тогда, когда двойное преломление отсутствует, т. е. при распространении света в кристалле по направлению оптической оси. В природе встречаются две модификации кристаллов кварца - правая и левая. В правых и левых кристаллах плоскости колебаний поворачиваются в противоположных направлениях. Если для наблюдателя, смотрящего навстречу световому лучу, плоскость колебаний на выходе из кварца повернута по часовой стрелке, то такой кварц называется правоворотящим или правым. Для того, чтобы избежать неоднозначности при экспериментальном определении направления вращения в кварце, толщина исследуемого образца должна быть достаточно мала (не более одного миллиметра). Угол поворота плоскости колебаний в кварце пропорционален толщине образца d и равен $\alpha = \alpha_1 d$, где α_1 -удельное вращение, измеряемое в град/мм. Величина α_1 сильно зависит от длины волны и быстро увеличивается при переходе от красного света к фиолетовому. Зависимость $\alpha_1(\lambda)$ называется дисперсией вращения плоскости колебаний или дисперсией оптической активности. Если на вход кварцевой пластинки поступает линейно поляризованный белый свет, то на ее выходе плоскости колебаний различных спектральных компонент поля $E(\lambda)$ развернуты в "цветовой веер от красного цвета к фиолетовому.

4.2. Бикварц

Бикварц состоит из двух одинаковых полукруглых пластинок из левого и правого кварца, склеенных по диаметральному сечению. Толщина обеих половинок одинакова и равна 3,75 мм. При такой толщине плоскости колебаний фиолетового света на выходе из бикварца повернуты в противоположных направлениях на 180° , а плоскости колебаний наиболее ярких в спектре зеленовато-желтых лучей - на 90° . Поэтому, в параллельных николях зеленовато-желтый свет будет полностью погашен, а фиолетовый - полностью пропущен, и при точной установке николей обе половинки бикварца будут окрашены в характерный серовато-фиолетовый оттенок. При скрещенных николях окраска сменится на дополнительную зеленовато-желтого оттенка. Малейшее отклонение одного из николей от параллельной или скрещенной установки вызывает резкое различие в окраске обеих половинок бикварца. Поэтому бикварц позволяет установить николи в параллельное или

скрещенное положение с более высокой точностью, чем при обычной установке их на темноту.

4.3. Практическая часть

4.3.1 Определение типа пластинок

Поставив анализатор на темноту, наблюдали изменение интенсивности при вращении пластинок.

Были определены две четверть-волновые, одна полуволновая и одна кварцевая пластиинки.

4.3.2 Наблюдения с узкополосным фильтром

Согласно формуле (17) интенсивность не будет изменяться при вращении анализатора при установлении четверть-вольновой пластиинки в диагональное положение.

Опытным путём мы определили из имеющихся пластиинок пластиинку $\frac{\lambda}{4}$ и получили с её помощью свет с круговой поляризацией.

Рассмотрим случай скрещенных николей и диагонально установленной полуволновой пластиинки. В этом случае интенсивность на выходе из анализатора будет вдвое меньше интенсивности света, прошедшего через поляризатор (см.??). Также вне зависимости от поляризации падающего света, мы получим на выходе линейно поляризованный свет.

В случае параллельных николей (см.19) интенсивность света на выходе анализатора будет вдвое меньше интенсивности падающего света. Поляризация также будет полностью или частично линейной в зависимости от качества поляризатора.

4.3.3 Вращение поляризации в кристаллах кварца

5. Заключение